
Tissue-Tek VIP® 6 AI

Vakuuminfiltrationsprozessor

Stellen Sie sich vor ...
*Zuverlässigkeit, Sicherheit
und Komfort auf neuem Niveau.*



continuous innovation for pathology





Tissue-Tek VIP® 6 AI

Der Tissue-Tek VIP 6 AI Vakuuminfiltrationsprozessor basiert auf Generationen von Gold-Standard-Technologie und ist eine zuverlässige und sichere Methode für die hochwertige Probenverarbeitung. Indem er den Schwerpunkt auf die Benutzerfreundlichkeit und den Schutz von Patientengewebe und Anwender legt, hebt der VIP 6 AI die VIP-Serie auf ein ganz neues Niveau.

Unterstützen Sie Ihr Labor mit dem Tissue-Tek VIP 6 AI:

- Vertrauen in die Gold-Standard-Technologie
- Die von Sakura empfohlenen Protokolle sorgen für eine hochwertige Probenverarbeitung
- Verbesserte Sicherheit von Patientengewebe und Personal
- Bewährte Zuverlässigkeit


**Eine Kombination aus Verlässlichkeit,
Sicherheit und Qualität.**



Tissue-Tek VIP® 6 AI





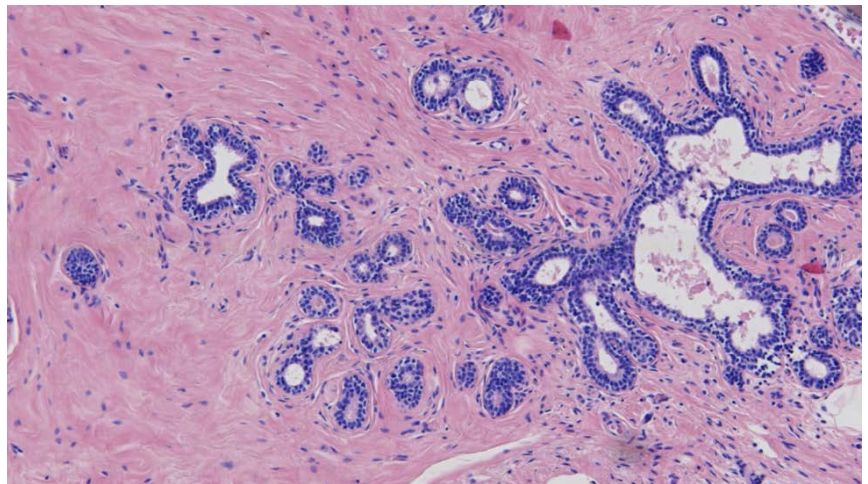

Hochwertige Entwässerung

Es wurde eine Reihe von empfohlenen Protokollen entwickelt, um hochwertige Blöcke zu erhalten. Die Protokolle umfassen sowohl xylolhaltige als auch xylolfreie Protokolle für Biopsien, routinemäßige Übernachtproben und Fettproben.



Bewährte Zuverlässigkeit

Der Tissue-Tek VIP 6 AI wurde entwickelt, entworfen und konstruiert, um einen besonders zuverlässigen Laborprozessor bereitzustellen, der mit absoluter Sicherheit immer für Sie da ist.

Mit dem Wartungssupport von Sakura können Sie zudem sicher sein, dass Ihr Gerät stets den höchsten Sakura-Finetek-Standards entspricht. Originalteile von Sakura werden für alle Dienstleistungseinsätze und für die jährliche vorbeugende Wartung eingesetzt. Nur vom Hersteller geschulte und zertifizierte Techniker führen diese Dienstleistung durch, was in Übereinstimmung mit den ISO-Standards steht. Sakura hat seine Zuverlässigkeit mit der Einführung von iSupport für den Tissue-Tek VIP 6 AI noch weiter verbessert. Dieses Echtzeit-Fernüberwachungssystem erhöht die Geschwindigkeit, mit der ein System im Falle eines unerwarteten Ausfalls repariert werden kann.



Sicherheit auf höchstem Niveau

Der Schutz des Laborpersonals und der Patientengewebeprobe haben für uns höchste Priorität. Der Tissue-Tek VIP 6 AI schützt die Gewebeprobe des Patienten während der Entwässerung mit dem hochentwickelten Lösungsmanager. Diese Funktion stellt die Integrität des Gewebes sicher, indem sie ein Austrocknen verhindert, selbst wenn ein Mangel an Reagenz festgestellt wird. In diesem Fall wird automatisch Reagenz aus der nachfolgenden Station oder aus den beiden Reagenzien-Großtanks gezogen. Jetzt können Sie sich darauf verlassen, dass der Entwässerungszyklus abgeschlossen wird und Unterbrechungen im Arbeitstag vermieden werden.

Das geschlossene System des Tissue-Tek VIP 6 AI mit Großtanks, Reagenzienmanagementsystem und leistungsfähigen Filtern schützt das Laborpersonal vor gefährlichen Dämpfen. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einen einfachen Reagenzienwechsel während des Entwässerungsvorgangs. So ist sichergestellt, dass frisches Reagenz für die Gewebeprobe vorhanden ist. Belastungen mit Lösungsmitteldämpfen und der manuelle Umgang mit großen Reagenzmenen werden weitestgehend vermieden.



Eine Komplettlösung für die Verarbeitung

Der VIP 6 AI ist die Lösung, um zuverlässig Proben aller Gewebearten in gleichbleibend hoher Qualität zu entwässern.

Die Kombination aus dem VIP 6 AI und hochwertigen Verbrauchsmaterialien wie dem Tissue-Tek® Paraffinwachs bzw. den wertsteigernden Sakura-Dienstleistungen (wie dem VIP-6-AI-Platin-Servicevertrag oder der VIP-6-AI-Anwenderschulung) erhöht nochmals die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität dieser Verarbeitungskomplettlösung für Ihr Labor.

Verbrauchsmaterialien

Tissue-Tek® Paraffinwachs

Sakura bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Paraffinwachsen unterschiedlicher Art und Verpackungsgröße für verschiedene Temperaturbereiche.



Tissue-Tek® Tissue-Clear® Xylolersatzstoff

Ein Xylolersatzstoff, der keine Reizungen der Haut oder Schleimhäute verursacht und geruchlos ist.







Besuchen Sie uns auf sakura.com

Sakura Finetek Germany GmbH, Am Gansacker 10 c, 79224 Umkirch, Germany
Sakura Finetek Austria GmbH, Office Park 1, Top B02, 1300 Wien, Austria

